




DR9-C PLUS

Capteur Plan 14 x 17" Wi-Fi

Intelligent, portable, rapide, ultra sensible

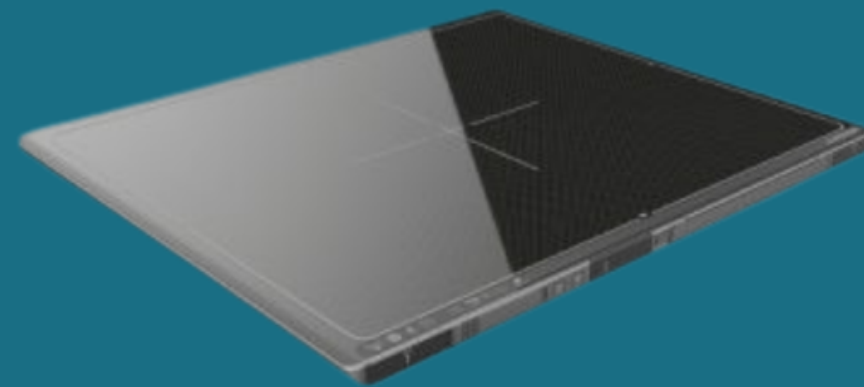

DR9-C PLUS

Le DR9-C WIFI est un capteur plan, dernière génération, intelligent, portable, optimisé pour correspondre aux besoins des vétérinaires équins, en utilisation clinique ou en itinérant. Ce détecteur est également plébiscité par les cliniques Vétérinaires mixtes Equine / Canine.

La conception monobloc, de son boîtier en fibre de carbone, rend le détecteur robuste, et très résistant aux chocs et aux griffures. Ne pesant que 3kg, ce DR9-C, aux dimensions ISO 4090 d'une grande cassette radiographique, est le capteur idéal pour réaliser des clichés des dos et des cervicales de chevaux.

Le DR9-C est fabriqué dans des matériaux Premium. La combinaison entre la matrice au silicium et un écran scintillateur au Iodure de Césium donne une grande sensibilité du capteur (DQE) qui jumule à un pixel de 127 μ et une résolution de 3,9 P/L, permettent d'obtenir des images d'une qualité exceptionnelle.

Le DR9-C est le plus grand des capteurs plans du marché. Intégrant un système WIFI, les images sont directement envoyées, en quelques secondes sur un ordinateur portable connectés sous Windows ou IOS. Une mémoire de stockage permet aussi de réaliser des clichés en aveugle, lorsque la connexion avec l'ordinateur est interrompue. De cette façon, vos clichés radiographiques restent disponibles et ils ne sont pas perdus.

Le DR9-C fonctionne avec tous les générateurs portables grâce à la technologie d'Auto Détection AED.

Le DR9-C est LA solution polyvalente idéale pour une approche plus simple, plus rapide, et plus rationnelle, de la radiographie numérique de grande qualité.



Zone detection	36 x 43 cm
Dimensions (L x l x E)	384 x 460 x 15.4 mm
Zone active	357.6 x 422.7 cm
Type capteur	Silicone Amorphe avec TFT
Scintillateur	Cesium-Iodide (Csl)
Poids	3.1 kg
Résolution spatiale	2756 x 3268 pixels
Taille pixel	127 µm
Resolution limite	Max. 3.9 lp/mm
Plage d'utilisation	40 - 150 kV
A/D conversion	14 or 16 bits
Temps acquisition image	< 3.0 sec (Wi-Fi)

DR9-C Configuration

Configuration





Distributeur exclusif des produits



Pour toutes demandes d'informations :

contact@si-veterinaire.fr